




PARI COMPACT

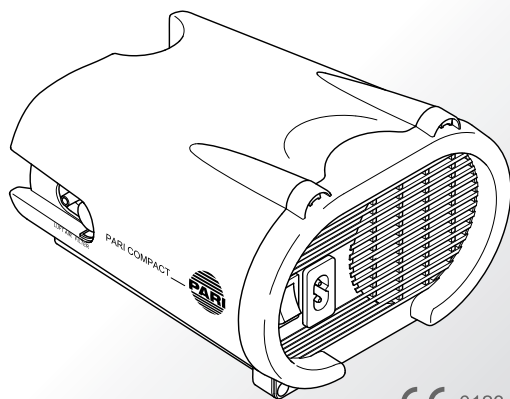

CE 0123

Návod na použitie

Stav informácie: 2012-03. Technické zmeny vyhradené.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA	4
Všeobecne	4
Forma bezpečnostných upozornení.....	4
Manipulácia s kompresorom	4
Terapia dojčiat, detí a osôb odkázaných na pomoc iných ...	6
OPIS VÝROBKU	7
Rozsah dodávky.....	7
Určené použitie	8
Kombinácie výrobkov	8
Funkčné prvky	9
UVEDENIE DO PREVÁDZKY	10
Inštalácia	10
Príprava.....	11
Uskutočnenie inhalácie	13
Ukončenie inhalácie	14
Životnosť	14
ÚDRŽBA	15
Čistenie kompresora	15
Výmena filtra	16
Oprava	17
Uschovanie	17
ZISŤOVANIE PORÚCH	18
TECHNICKÉ ÚDAJE	19
Všeobecne	19
Klasifikácia podľa DIN EN 60601-1	19
Údaje týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility	20
Odporúčané bezpečné vzdialenosti	21
Podmienky okolia pre prevádzku	21

INÉ	22
Doprava a skladovanie.....	22
Likvidácia	22
Záručné podmienky.....	22
Kontakt	24
Vysvetlivky symbolov	24
NÁHRADNÉ DIELCE	25

1 DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

1.1 Všeobecne

Dôkladne si prečítajte tento návod na použitie. Uschovajte si ho pre prípad potreby. Pri nedodržaní návodu na použitie nemožno vylúčiť poranenia alebo poškodenie výrobku.

1.2 Forma bezpečnostných upozornení

Upozornenia dôležité z hľadiska bezpečnosti sú v tomto návode na použitie rozdelené podľa stupňa nebezpečenstva:

- Signálnym slovom VÝSTRAHA je označené nebezpečenstvo, ktoré bez bezpečnostných opatrení môže viesť k ťažkým poraneniam alebo dokonca k smrteľným úrazom.
- Signálnym slovom POZOR je označené nebezpečenstvo, ktoré bez bezpečnostných opatrení môže viesť k ľahkým až stredne ťažkým poraneniam alebo k nepriaznivému ovplyvneniu terapie.
- Signálnym slovom UPOZORNENIE sú označené všeobecné bezpečnostné opatrenia, ktoré sa majú rešpektovať pri zaobchádzaní s výrobkom, aby sa predišlo jeho poškodeniu.

1.3 Manipulácia s kompresorom

Kompresor je elektrický prístroj, ktorý je napájaný sieťovým napätím. Je skoncipovaný tak, aby neboli prístupné žiadne jeho časti, ktoré sú pod napätím. V prípade nevhodných podmienok okolia, príp. poškodenia kompresora alebo sieťového vodiča už nie je táto ochrana zabezpečená. Rešpektujte preto nasledovné upozornenia, aby sa predišlo poškodeniu prístroja a s tým súvisiacemu nebezpečenstvu kontaktu s časťami pod napätím (napr. zasiahnutie elektrickým prúdom):

- Kompresor nemá ochranu proti striekajúcej vode. Chráňte prístroj a sieťový vodič pred tekutinami a mokrom. Nikdy nechytajte sieťový vodič alebo sieťovú zástrčku vlhkými

rukami. Prístroj sa nesmie okrem toho používať vo vlhkom prostredí.

- Na prevádzku kompresora používajte len sieťový vodič PARI.
- Kompresor počas prevádzky nikdy nenechávajte bez dozoru.
- Z bezpečnostných dôvodov sieťovú zástrčku vždy vytiahnite zo zásuvky za týchto okolností:
- Sieťový vodič vytiahnite zo zásuvky ťahaním za zástrčku, nie za kábel.
- Dbajte na to, aby ste sieťový vodič nezlomili alebo neprivreli. Sieťový vodič neťahajte cez ostré hrany.
- Kompresor a sieťový vodič držte v bezpečnej vzdialenosti od horúcich plôch (napr. platne sporáka, tepelného žiariča, otvoreného ohňa). Kryt kompresora alebo izolácia sieťového kábla by sa mohli poškodiť.
- Sieťový vodič udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od domácich zvierat (napr. hlodavcov). Mohli by poškodiť izoláciu sieťového vodiča.
- Kompresor sa nesmie uviesť do prevádzky, príp. sa musí okamžite vytiahnuť sieťová zástrčka zo zásuvky, ak je kompresor alebo sieťový vodič poškodený alebo je podozrenie, že je zariadenie poškodené po páde alebo podobne.

1.4 Terapia dojčiat, detí a osôb odkázaných na pomoc iných


Dojčatá, malé deti, deti a osoby odkázané na pomoc iných smú inhalovať len pod stálym dohľadom dospelých. Len takto je zaručená bezpečná a efektívna terapia. Tieto osoby často neposúdia správne riziká (napr. uškrtenie sieťovým vodičom alebo prípojnou hadicou), ktoré môžu viesť k nebezpečenstvu poranenia.

Výrobok obsahuje malé časti. Malé časti môžu zablokovat' dýchacie cesty, čo môže viesť k vzniku nebezpečenstva udusenía. Dbajte teda na to, aby ste kompresor, rozprašovač a príslušenstvo vždy držali mimo dosahu dojčiat a malých detí. Prístroj a prípojná hadica na výstupe kompresora sa môžu pri normálnej prevádzke zahriať. Zabráňte preto, aby ošetrovaní pacienti prišli do priameho styku s kompresorom. Pri dlhšom priamom kontakte sa môžu vyskytnúť popáleniny kože, zvlášť u osôb s poruchami vnímania tepla.

2 OPIS VÝROBKU

2.1 Rozsah dodávky

Skontrolujte, či sú obsahom dodávky vášho kompresora všetky príslušné komponenty. V prípade, že niečo chýba, okamžite to oznámte predavcovi, u ktorého ste kúpili kompresor PARI.

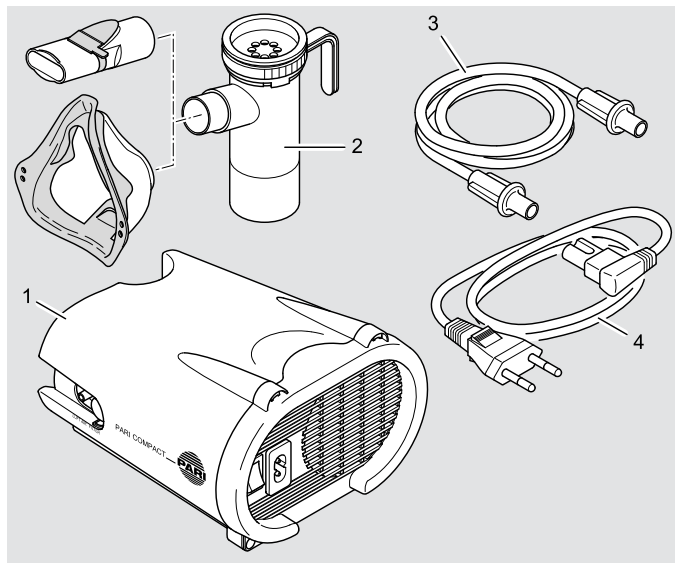

(1) Kompresor

(3) Prípojná hadica

(2) Rozprašovač¹⁾

(4) Sieťový vodič

1) Vyobrazený rozprašovač je rozprašovač PARI LC Plus a je potrebné ho považovať za príklad výrobku. V závislosti od produktového balíka môžu byť súčasťou dodávky aj iné rozprašovače PARI. Rozsah dodávky rozprašovača pozri v jeho návode na použitie.

2.2 Určené použitie

Kompresor slúži na výrobu tlakového vzduchu potrebného na prevádzku rozprašovača PARI. Kompresor sa smie používať len pre rozprašovač PARI. Je určený výlučne na používanie v interiéroch.

Použitie na iný účel ako určený alebo použitie rozprašovačov alebo príslušenstva iných výrobcov môže viesť k obmedzeniu účinnosti terapie, poškodeniu prístroja alebo dokonca k poraneniam.

Spoločnosť PARI GmbH neručí za škody, ku ktorým dôjde pri používaní kompresora v rozpore s určeným účelom použitia. Platí to zvlášť pri použití kompresora na iný účel ako určený alebo pri použití rozprašovačov, príp. príslušenstva iných výrobcov. V týchto prípadoch zanikajú akékoľvek nároky vyplývajúce zo záruky.

2.3 Kombinácie výrobkov


Kompresor je vhodný na prevádzku s nasledovnými rozprašovačmi:

- Všetky rozprašovače radu PARI LC SPRINT
- Všetky rozprašovače radu PARI LC

Pri prvej kúpe a každom dokúpení je k rozprašovaču vždy priložený samostatný návod na použitie.

2.4 Funkčné prvky

Kompresor PARI COMPACT má nasledujúce funkčné prvky:

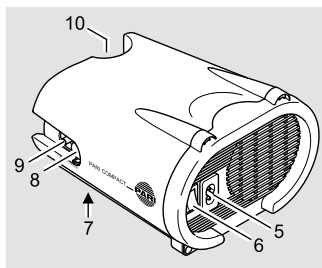

- (5) Sieťová zásuvka
- (6) Spínač zap./vyp.
- (7) Typový štítok
(na spodnej strane
zariadenia)
- (8) Filter
- (9) Hadicová prípojka
- (10) Držiak pre rozprašovač

3 UVEDENIE DO PREVÁDZKY

3.1 Inštalácia

Miestnosť, v ktorej sa kompresor používa, musí spĺňať určité predpoklady [pozri kapitolu: 6.5 Podmienky okolia pre prevádzku]. Kompresor nie je určený na použitie v exteriéri.

POZOR

Pri inštalácii kompresora dodržiavajte nasledovné pokyny, aby ste sa vyhli **nebezpečenstvu poranenia** alebo **poškodenia prístroja**:

- Kompresor postavte na pevný, rovný, bezprašný a suchý podklad. Mäkký podklad, napr. pohovka, posteľ alebo ohrus, nie je vhodný, kompresor by mohol spadnúť.
- Sieťový vodič uložte tak, aby nepredstavoval nebezpečenstvo zakopnutia a aby sa doň nikto nezaplietol.
- Dbajte na to, aby deti kompresor nestiahli ťahaním za sieťový vodič alebo prípojnú hadicu.
- Kompresor používajte len v bezprašnom prostredí. Pri prevádzke v prašnom prostredí (napr. pod posteľou alebo v dielnach), ako aj pri prevádzke na podlahe sa môže v kryte nadmerne usadzovať prach, čím sa môže obmedziť terapia alebo poškodiť kompresor.

VÝSTRAHA

Aby sa predišlo **nebezpečenstvu požiaru** následkom **skratu**, dodržiavajte pri inštalácii kompresora nasledovné pokyny:

- Nepoužívajte kompresor v blízkosti zápalných predmetov, ako sú napr. záclony, ohrusy alebo papier.

- Kompresor nepoužívajte v oblastiach ohrozených explóziou, príp. v prítomnosti plynov zvyšujúcich horľavosť (napr. kyslík, oxid dusný, horľavé anestetiká).


3.2 Príprava

Pred každým použitím skontrolujte kryt kompresora, sieťový vodič a sieťovú zástrčku, či nie sú porušené. Uistite sa, že miestne sieťové napätie sa zhoduje s údajmi o napätí na typovom štítku kompresora. Kompresor používajte len vtedy, keď sú všetky jeho súčasti neporušené. Kompresor sa nesmie uviesť do prevádzky, keď je prístroj alebo sieťový vodič poškodený alebo ak existuje podozrenie, že je poškodený (napr. po páde alebo v prípade zápachu z roztaveného plastu).

Prístroj pripravte na inhaláciu nasledovne:

- Rozprašovač zostavte podľa opisu v návode na použitie rozprašovača.
- Zasuňte jeden koniec prípojnej hadice na rozprašovači.
- Druhý koniec prípojnej hadice zasuňte na kompresore.

Hadicové konektory sa dajú lepšie nasunúť, keď sa pri nasúvaní ľahko otočia.

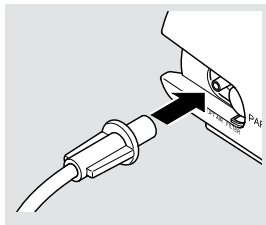

VÝSTRAHA

Starostlivo skontrolujte, či prípojná hadica zapojená na kompresore PARI je na druhom konci spojená s rozprašovačom PARI.


Ak existuje viac hadicových systémov, hrozí možné nebezpečenstvo **ohrozenie života**, ak by neúmyselne došlo k vzájomnej zámene pripojení. Ide predovšetkým o **ošetrovaných pacientov**, ktorí sú napríklad odkázaní na umelú výživu alebo infúzie.

- Rozprašovač vsuňte do držiaka na kompresore, ktorý je na to určený.
- Naplňte rozprašovač podľa opisu v návode na použitie rozprašovača.

VÝSTRAHA

Tekutiny môžu viesť prúd, čím vzniká **nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom**. Preto nikdy nechyťajte sieťový vodič alebo sieťovú zástrčku vlhkými alebo mokрыmi rukami.



- Spojte sieťový vodič so zásuvkou sieťového pripojenia kompresora.
- Zasuňte sieťovú zástrčku do vhodnej zásuvky.

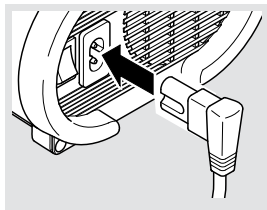

3.3 Uskutočnenie inhalácie

Aby sa predišlo prehriatiu kompresora, prístroj počas prevádzky nezakrývajte a dbajte na to, aby bočné vetracie otvory zostali nezakryté. Zakrytie kompresora alebo vetracích otvorov by mohlo obmedziť chladenie kompresora.

- Pred ošetrením vytiahnite rozprašovač z držiaka von.
- Kompresor spustíte pomocou spínača zap./vyp.
- Pred začatím inhalácie sa presvedčte, či sa z lieku vytvára aerosól.

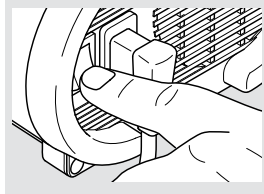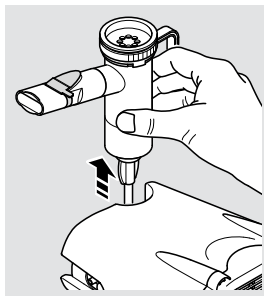

VÝSTRAHA

Pri **poškodení prístroja** môže dôjsť ku kontaktu s časťami pod napätím, čím môže vzniknúť **nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom**. Preto keď je kompresor alebo sieťový vodič poškodený alebo ak existuje podozrenie poškodenia (napr. po páde alebo v prípade zápachu z roztaveného plastu), ihneď vypnite kompresor a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

- Inhaláciu uskutočnite podľa opisu v návode na použitie rozprašovača.

3.4 Ukončenie inhalácie

- Vypnite kompresor.
- Rozprašovač znovu vložte do jeho držiaka.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

 Prístroj je úplne odpojený od siete len vtedy, keď je vytiahnutá sieťová zástrčka zo zásuvky.

3.5 Životnosť

Kompresor má predpokladanú priemernú životnosť:

- cca 500 prevádzkových hodín
- max. 2 roky


4 ÚDRŽBA

4.1 Čistenie kompresora

VÝSTRAHA

Tekutiny môžu viesť prúd, čím vzniká nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom. Pred každým čistením kompresor preto vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

- Vonkajšie plochy krytu utrite čistou, vlhkou handričkou.

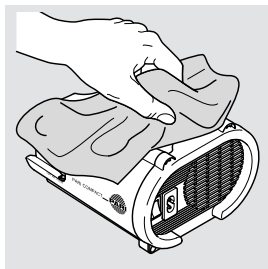

UPOZORNENIE

Tekutiny, ktoré by do prístroja vnikli, môžu spôsobiť poškodenie prístroja. Preto nestriekajte tekutiny na kompresor alebo na sieťový vodič.

Ak do kompresora vnikla tekutina, prístroj sa v žiadnom prípade už nesmie použiť. Pred ďalším používaním kompresora sa bezpodmienečne spojte s technickým servisom spoločnosti PARI GmbH alebo so servisným centrom PARI [pozri kapitolu: 7.4 Kontakt].

Pri čistení rozprašovača a príslušenstva rešpektujte príslušný návod na použitie.

4.2 Výmena filtra

Pri bežných prevádzkových podmienkach musíte filter kompresora meniť každých 200 prevádzkových hodín, minimálne však raz ročne.

Okrem toho filter kontrolujte v pravidelných intervaloch (po každej 10. inhalácii). Ak je znečistený (sfarbený dosiva alebo dohneda) alebo upchatý, vymeňte ho. Ak filter navlhne, tiež je nutné vymeniť ho za nový.


Filter nemožno vyčistiť a znova používať!

UPOZORNENIE

Používajte výlučne vzduchové filtre, ktoré sú určené na prevádzku vášho kompresora spoločnosťou PARI, v opačnom prípade by sa mohol váš **kompresor poškodiť** alebo by sa nedala zabezpečiť dostatočná terapia.

Pri výmene filtra postupujte nasledovne:

- Priložený menič filtra (11) nasuňte na filter (7). Otočením sa dá filter ľahko odstrániť z krytu kompresora.

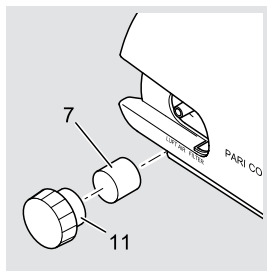

- Zoberte nový filter a zatlačte ho otvorom dopredu až na doraz na pravý adaptér v tvare kríža.

4.3 Oprava

Opravu kompresora smie vykonávať výlučne technický servis spoločnosti PARI GmbH alebo servis výslovne na to splnomocnený spoločnosťou PARI. Ak kompresor otvorí alebo s ním manipulujú iné osoby, akékoľvek nároky vyplývajúce zo záruky zaniknú. V takomto prípade nepreberá spoločnosť PARI GmbH žiadnu záruku.

4.4 Uschovanie

- Odpojte sieťový vodič od kompresora.
- Naviňte sieťový vodič.

UPOZORNENIE

Zlomením sa môže sieťové vedenie poškodiť. Sieťový vodič preto neovíjajte okolo kompresora.

Kompresor a príslušenstvo uskladnite na mieste chránenom pred priamym trvalým slnečným žiarením.

Kompresor uschovajte vždy v stave odpojenom od elektrickej siete, pretože elektrické prístroje zapojené do elektrickej siete môžu predstavovať potenciálny zdroj nebezpečenstva.

5 ZISŤOVANIE PORÚCH

Porucha	Možná príčina	Postup
Kompresor sa nerozbehne.	Sieťový vodič nie je správne zasunutý do prístroja.	Skontrolujte, či je sieťový vodič správne zapojený do zásuvky sieťového pripojenia kompresora.
	Sieťová zástrčka nie je správne zapojená do zásuvky.	Skontrolujte, či je sieťová zástrčka správne zapojená do zásuvky.
Z rozprašovača nevychádza liek.	Tryska rozprašovača je upchatá.	Vyčistite rozprašovač.
	Prípojná hadica nie je správne zapojená.	Skontrolujte, či je prípojná hadica správne zapojená.
	Prípojná hadica má netesnosti.	Vymeňte prípojnú hadicu.

V prípade porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto kapitole alebo ak sa navrhovaným postupom porucha neodstráni, obráťte sa na servisné centrum spoločnosti PARI GmbH [pozri kapitolu: 7.4 Kontakt].

6 TECHNICKÉ ÚDAJE

6.1 Všeobecne

Sieťové napätie	220 V – 240 V
Sieťová frekvencia	50 Hz
Spotreba prúdu	0,6 A
Rozmery krytu [cm]	16 × 10 × 15 (Š × V × H)
Prietok kompresorom ¹⁾	3,9 l/min
Hladina akustického tlaku ²⁾	cca 58 dBA
Tlak	1,1 bar
Hmotnosť	1,2 kg

1) Proti dýze rozprašovača PARI (Ø 0,48 mm)

2) Maximálna hodnota A hladiny akustického tlaku kompresora
(podľa DIN EN 13544-1, odsek 26)

6.2 Klasifikácia podľa DIN EN 60601-1

Druh ochrany proti zasiahnutiu elektrickým prúdom	Trieda ochrany II
Stupeň ochrany použitej časti (rozprašovača) proti zásahu elektrickým prúdom	Typ BF
Stupeň ochrany proti vniknutiu vody podľa IEC 529 (stupeň ochrany IP)	Bez ochrany
Stupeň ochrany pri použití v prítomnosti horľavých zmesí anestetík so vzduchom, kyslíkom alebo oxidom dusným	Bez ochrany
Druh prevádzky	Trvalá prevádzka

6.3 Údaje týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility

Medicínske prístroje so zreteľom na elektromagnetickú kompatibilitu podliehajú zvláštnym bezpečnostným opatreniam. Inštalovať a uviesť do prevádzky sa smú len podľa predpisov o elektromagnetickej kompatibilite.

Prenosné a mobilné vysokofrekvenčné komunikačné zariadenia môžu ovplyvniť medicínske elektrické zariadenia. Používanie iného príslušenstva, iných transformátorov a vodičov, ako je uvedené, s výnimkou transformátorov a vodičov, ktoré výrobca medicínskeho elektrického prístroja predáva ako náhradné dielce interných komponentov, môže viesť k zvýšeným emisiám alebo zníženej pevnosti prístroja.

Prístroj nesmie byť uložený bezprostredne vedľa alebo s inými prístrojmi. Ak je potrebná prevádzka v blízkosti iných prístrojov alebo s inými prístrojmi, mal by sa medicínsky prístroj sledovať, aby sa zabezpečila jeho riadna prevádzka v danom usporiadaní.

Technické údaje týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility (predpisy o elektromagnetickej kompatibilite) vo forme tabuľky sú priložené k prístroju. Okrem toho ich možno vyžiadať od spoločnosti PARI GmbH alebo stiahnuť prostredníctvom internetu na www.pari.de/en/products na príslušnej stránke výrobku pod odkazom „Technical Data“.

6.4 Odporúčané bezpečné vzdialenosti

Odporúčané bezpečné vzdialenosti medzi prenosnými a mobilnými vysokofrekvenčnými telekomunikačnými prístrojmi a kompresorom PARI:

Kompresor PARI je určený na prevádzku v elektromagnetickom prostredí, v ktorom je vysokofrekvenčné žiarenie s rušivými hodnotami kontrolované. Používateľ môže pomôcť zabrániť elektromagnetickému rušeniu tým, že dodrží minimálne vzdialenosti medzi prenosnými a mobilnými vysokofrekvenčnými komunikačnými zariadeniami (vysielačmi) a kompresorom PARI podľa príslušných odporúčaní maximálneho výstupného výkonu komunikačného zariadenia.

Bezpečnostná vzdialenosť podľa vysielacej frekvencie:

Menovitý výkon vysielача [W]	150 kHz až 80 MHz $D = (3,5/3) \times \text{SQRT}(P)$ [m]	80 MHz až 800 MHz $D = (3,5/3) \times \text{SQRT}(P)$ [m]	800 MHz až 2,5 GHz $D = (7/3) \times \text{SQRT}(P)$ [m]
0,01	0,2	0,2	0,3
0,1	0,4	0,4	0,8
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Pre vysielачe, ktorých menovitý výkon sa nenachádza vo vyššie uvedenej tabuľke, sa môže vzdialenosť určiť na základe porovnania s príslušným stĺpcom, pričom „P“ je menovitý výkon vysielача vo wattoch (W) podľa údajov výrobcu vysielача.

6.5 Podmienky okolia pre prevádzku

Teplota okolia	+10 °C až +35 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	30 % až 75 % (nekondenzujúca)
Tlak vzduchu	700 hPa až 1 060 hPa

7 INÉ

7.1 Doprava a skladovanie

Minimálna teplota okolia	-25 °C (bez kontroly relatívnej vlhkosti vzduchu)
Maximálna teplota okolia	+70 °C (pri relatívnej vlhkosti vzduchu max. 93 %, nekondenzujúcej)
Vlhkosť vzduchu	0 % – 93 %
Tlak vzduchu	500 hPa až 1 060 hPa

7.2 Likvidácia

Tento výrobok spadá do oblasti platnosti OEEZ¹⁾. Na základe toho sa tento výrobok nesmie likvidovať prostredníctvom domáceho odpadu. Je potrebné dodržiavať príslušné predpisy na likvidáciu odpadu špecifické pre danú krajinu (napr. likvidácia odpadu prostredníctvom obcí a obchodníkov). Recyklácia materiálov napomáha pri znižovaní spotreby surovín a ochrane životného prostredia.

1) Smernica 2002/96/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení.

7.3 Záručné podmienky

PARI vám od dátumu kúpy počas záručnej doby uvedenej v záručnom liste ručí pri riadnom používaní v súlade s určeným používaním za výrobné chyby vášho prístroja podmienené materiálom alebo spracovaním. Nárok vyplývajúci zo záruky podlieha premlčaniu 12 mesiacov. Navyše k záručným záväzkom vášho predajcu platí záruka poskytnutá spoločnosťou PARI. Záonné práva v prípade chýb, ktoré si môžete uplatniť u vášho predajcu, nie sú obmedzené zárukou alebo prípadom záručného plnenia. Za doklad záruky a vlastníctva sa pokladá záručný list opečiatkovaný špecializovaným predajcom.

Čo zahŕňa záruka?

Ak by sa mimoriadne vyskytli chyby výrobku, spoločnosť PARI vám podľa svojho výberu prístroj opraví, vymení alebo vráti nákupnú cenu výrobku. Prístroj sa vymení za rovnaký model alebo model s minimálne porovnateľnou výbavou. Výmena alebo oprava prístroja nie je dôvodom na poskytnutie novej záruky. Všetky vymenené použité prístroje alebo súčiastky sú majetkom PARI. Ďalšie nároky sú vylúčené. Platí to zvlášť pre akékoľvek nároky na náhradu škody. Vylúčenie záruky sa neuplatňuje v prípade usmrtenia, telesného poranenia a poškodenia zdravia úmyselne a následkom hrubej neobstaranosti, pri zodpovednosti za chyby výrobkov a pri porušení dôležitých povinností vyplývajúcich zo záručnej zmluvy.

Záruka nie je poskytnutá, keď

- sa prístroj neuviedol do prevádzky alebo nepoužíval riadne podľa určenia v návode na použitie
- existujú poškodenia, ktoré sú následkom vonkajších vplyvov ako voda, oheň, úder blesku a pod.
- existuje poškodenie následkom nevhodného transportu alebo pádu
- bola uskutočnená nevhodná a neodborná údržba a ošetrovanie prístroja
- sériové číslo na prístroji bolo zmenené, odstránené alebo ináč bola spôsobená jeho nečitateľnosť
- opravy, prispôsobenia alebo zmeny uskutočnili osoby, ktoré nie sú autorizované spoločnosťou PARI

Ďalej sa záruka nevzťahuje na opotrebovateľné dielce, teda časti prístroja, ktoré sú vystavené normálnemu opotrebovaniu.

V prípade reklamácie prineste celé zariadenie k vášmu špecializovanému predajcovi alebo nám ho zašlite zabalené v originálnom a ofrankovanom obale so záručným listom, potvrdeným špecializovaným predajcom.

Záručná lehota začína plynúť od dátumu kúpy.

7.4 Kontakt

Ďalšie informácie o výrobkoch akéhokoľvek charakteru alebo informácie o manipulácii vám poskytne naše servisné centrum:

Tel.: +49 (0)8151-279 279 (v nemeckom jazyku)
+49 (0)8151-279 220 (volania z cudziny)

7.5 Vysvetlivky symbolov

Na kompresore, príp. na obale sa nachádzajú nasledovné symboly:

	Rešpektujte návod na použitie (podklad = modrá, symbol = biela)
SN	Sériové číslo prístroja
	Zap./vyp.
	Striedavý prúd
	Stupeň ochrany aplikačnej časti: typ BF
	Chráňte prístroj pred vlhkom
	Zariadenie s triedou ochrany II
	Minimálna a maximálna teplota okolia
	Minimálna a maximálna vlhkosť vzduchu
	Minimálny a maximálny tlak vzduchu

	Zdravotnícky prístroj bol uvedený na trh po 13. auguste 2005. Výrobok sa nesmie likvidovať prostredníctvom normálneho domáceho odpadu. Symbol preškrtnutej nádoby na odpad upozorňuje na potrebu umiestnenia odpadu do separovaného zberu.
	Výrobca
	Kompresor spĺňa základné požiadavky podľa smernice 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach.

8 NÁHRADNÉ DIELCE

Popis	Tovarové č.
Filtročná vložka PARI COMPACT vrátane meniča filtra	041B6500
Prípojná hadica PARI COMPACT	041B4592
Sieťový vodič (1,5 m)	041E8236

PARI COMPACT

GARANTIESCHEIN

Für den Kompressor gewähren wir 2 Jahre Garantie.
Die Garantiezeit läuft ab Kaufdatum.

CERTIFICATE OF GUARANTEE

We grant a 2 year guarantee on the compressor,
commencing on the date of purchase.

PARI GmbH
Technischer Service
Holzhofstr. 10b
82362 Weilheim, Germany



Gerät Nr.
Appliance no.

Kaufbestätigung: Das Gerät mit der obigen Gerätenummer wurde von uns original verpackt verkauft.

Confirmation of purchase: The appliance with the above appliance number was sold in its original packaging.

Kaufdatum
Purchase date

Stempel und Unterschrift des Fachhändlers
Stamp and signature of the dealer

©2012 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 052D1018-A (3rd) 08/12



Spezialisten für effektive Inhalation



PARI GmbH

Moosstrasse 3 • 82319 Starnberg • Germany
Tel.: +49 (0)8151-279 0 • Fax: +49 (0)8151-279 101
E-Mail: info@pari.de • www.pari.de