



Inhalátor s nebulizátorem

PARI GmbH

Popis

Přístroj pro profesionální inhalační terapii. PARI COMPACT2 umožňuje účinnou a šetrnou inhalaci. Velmi jemné kapénky se dostávají hlouběji do dýchacích cest. PARI COMPACT2 je spolehlivé a výkonné zařízení, určené pro domácí inhalační terapii. Součástí přístroje je nebulizátor PARI LC PLUS, dětská maska, náustek a připojovací hadička. Jemná maska pro děti a náustek s ventilačním systémem poskytují účinnou terapii dolních cest dýchacích.



Určení

Vhodný k provádění inhalační terapie v pohodlí domova u pacientů s onemocněním dolních cest dýchacích (např. astma, CHOPN, bronchitida), či preventivnímu pečování o respirační systém. Možno použít i u dětí od 4 let.

Nebulizátor

Nebulizátor PARI LC PLUS je osvědčený nebulizátor s ventilovým systémem pro distribuci léčiv do periferních oblastí plic. Zároveň prokázal svou účinnost v řadě studií a je považován za „zlatý standard“ v nebulizační terapii onemocnění dolních cest dýchacích, jako jsou astma, CHOPN nebo bronchitida. Malý počet jednotlivých komponent umožňuje jednoduché použití a hygienické čištění. Díky integrovanému ventilovému systému jsou redukovány ztráty léčiva v exhalační fázi. Může se používat k inhalaci se všemi schválenými medikacemi.

Výhody

- kompaktní, spolehlivý a výkonný
- kvalitní a tichý kompresor
- jemná maska pro děti
- náustek s ventilovým systémem
- snadná manipulace a dezinfekce
- vyroben v Německu
- kód ZP v ČR: 5013560
- kód ZP v SR: K79993



PARI COMPACT2 kompletní balení

Technická data

Kompresor

rozměry (v x š x h)	13 cm x 18,5 cm x 15 cm
hmotnost	1,55 kg
tlak	1,2 bar
elektrické připojení	220—240 V~ / 50 Hz

Charakteristika aerosolu

Kompresor PARI COMPACT v kombinaci s nebulizátorem PARI LC PLUS

celkový výstupní výkon	440 mg/min
medián průměru částic (MDD)	3,6 µm
podíl částic s průměrem pod 5 µm	67 %

Typy produktů

Objednací kód

PARI COMPACT2

152G1001

Náhradní díly a volitelné příslušenství

PARI LC PLUS nebulizér	022G8104
PARI LC přerušovač	022G1000
Hadička 1,2 m (f/m)	041G4591
Hadička long	041B4587
Maska pro dospělé Soft	041G0740
Dětská maska Soft "Spiggy"	041G0741
Náustek univerzální	022E3050
PARI Filter Pad, balení 30 ks	041B0522
PARI Filter Pad, balení 100 ks	041B0523
PARI Filter Pad, balení 1000 ks	041B0524
PARI Filter/Valve set	041G0500


MR Diagnostic s. r. o.

Pod Višňovkou 1662/21
140 00 Praha 4
Česká republika

info@mr-diagnostic.cz
+420 245 005 648

Račianska 72
831 02 Bratislava 3
Slovenská republika

info@mr-diagnostic.cz
+421 (0)2 20 633 367

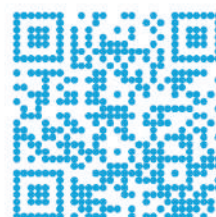

www.mr-diagnostic.cz