



Respiračná rehabilitačná pomôcka

PARI GmbH

Popis

O-PEP je fyzioterapeutická pomôcka, ktorá výrazným spôsobom prispieva k zlepšeniu efektivity dýchania pacientom s dýchacími ťažkosťami. Účinne uvoľňuje bronchiálne sliznice a pomáha čistiť dýchacie cesty. Liečebná metóda je založená na princípe striedavého výdychového pretlaku. Výsledkom liečby je ľahšie dýchanie vďaka zvýšenej periférnej pľúcnej ventilácii, znížená dýchavičnosť a zvýšená mobilizácia sekrétu z priedušiek.



Aktívna pomôcka pre dychovú rehabilitáciu

- zbavuje pacienta obťažujúceho hlienu
- slúži ako prevencia neproduktívneho kašľa
- uľahčuje dýchanie
- zlepšuje výmenu plynov
- zvyšuje vitálnu kapacitu pľúc
- znižuje odpor v dýchacích cestách

Primárne určenie pre pacientov s:

- produktívnym a neproduktívnym kašľom
- bronchitídou, chronickou bronchitídou
- astmou a významnou obštrukciou dýchacích ciest
- chronicky deformovanými stenami priedušiek
- cystickou fibrózou
- pľúcnym emfyzémom
- pachypleuritídou

Výhody

- zmierňuje neproduktívny kašeľ a dýchavičnosť
- možnosť dezinfekcie a sterilizácie
- použitie možné v sede aj v ľahu
- jednoduchá, ľahká a odolná konštrukcia
- jednoduchá údržba
- ľahké používanie i pre deti
- hygienický a bezpečný

Za predpokladu dodržania správneho uhla je možné pomôcku používať nielen vo vzpriamenej polohe, ale tiež v sede aj v ľahu. Uvoľňuje hlien pomocou vibrácie a tlaku. Zmenou uhla pri použití rehabilitačnej pomôcky O-PEP je možné regulovať intenzitu vibrácií. Veľmi jednoduchá údržba. O-PEP je rozoberateľný, všetky časti možno ľahko dezinfikovať. Pre domáce použitie je možné čistenie v umývačke. V prípade nemocničného použitia možno pomôcku sterilizovať. Balenie obsahuje pútko a puzdro na hygienické skladovanie a bezpečnú prepravu.

Technické dáta

rozmery (v x š x h)

60 mm x 90 mm x 40 mm

hmotnosť

78 g

materiál

polyoxymethylén



Typy produktov

Objednávací kód

PARI O-PEP

018G5000



PARI O-PEP s pútkom



Kompletné balenie PARI O-PEP

MR Diagnostic s. r. o.

Pod Višňovkou 1662/21
140 00 Praha 4
Česká republika

E: info@mr-diagnostic.cz

T: +420 245 005 648


W: www.mr-diagnostic.cz

Račianska 72
831 02 Bratislava 3
Slovenská republika

E: info@mr-diagnostic.cz

T: +421 (0)2 20 633 367

W: www.mr-diagnostic.cz

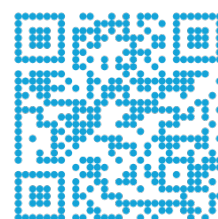

www.pari-inhalatory.sk