

Inhalačný prístroj

PARI GmbH

## Popis

PARI Compact je spoľahlivý a výkonný nebulizačný systém, určený pre domácu inhalačnú terapiu. Súčasťou prístroja je nebulizér PARI LC PLUS, detská maska a prepojovacia hadička (f/f).



## Nebulizér

Nebulizér PARI LC PLUS je osvedčený nebulizér s ventilovým systémom pre distribúciu liečiva do periférnych oblastí pľúc. Zároveň preukázal svoju účinnosť v rade štúdií a je považovaný za "zlatý štandard" v nebulizačnej terapii ochorení dolných ciest dýchacích, ako sú astma, CHOPCH alebo bronchitída.

Malé množstvo jednotlivých dielov umožňuje jednoduché použitie a hygienické čistenie. Vďaka integrovanému ventilovému systému sú straty liečiva v exhalačnej fáze redukované. Nebulizér PARI LC PLUS môže byť používaný so všetkými kompresormi PARI.

## Výhody

- kvalitný kompresor
- jednoduché použitie
- spoľahlivý a výkonný
- jemná detská maska
- náustok s ventilovým systémom
- kód ŠUKL K79993

## Určenie

Vhodný k prevádzaniu inhalačnej terapie v pohodlí domova pre pacientov s ochorením dolných ciest dýchacích (astma, CHOPCH, bronchitída). Možno ho používať pre deti už od 4 rokov.



Nebulizér PARI LC PLUS

## Technické údaje

### Kompresor

rozmery (v x š x d)	10 cm x 14 cm x 16 cm
hmotnosť	1,2 kg
elektrické pripojenie	220—240 V~ / 50 Hz / 0.6 A / 60 W

### Charakteristika aerosólu

Kompresor PARI Compact v kombinácii s nebulizérom PARI LC PLUS

celkový výstupný výkon	418 mg/min
mediánny priemer častíc (MDD)	3.9 µm
podiel častíc s priemerom pod 5 µm	64 %

Merané s prístrojom Malvern Mastersizer X ( spočítané podľa Fraunhoferovho modelu) vo 23 °C, pri 50% relatívnej vlhkosti, rozprašované médium:

0,9% NaCl (5 ml) tryskový prietok 20 l/min.

CE 0123

## Typy produktov

PARI Compact

## Objednávací kód

052G1000

## Voliteľné príslušenstvo

(nie je súčasťou balenia)

nebulizér PARI LC PLUS

022G8107

filter

041B6500

náustok

022E3050

maska pre deti Soft

022E3050

maska pre dospelých

041G0730

prerušovač pre LC PLUS

022G1000



PARI Compact s maskou

## MR Diagnostic s. r. o.

Pod Višňovkou 1662/21  
140 00 Praha 4  
Česká republika

E: info@mr-diagnostic.cz

T: +420 245 005 648


W: www.mr-diagnostic.cz

Račianska 72  
831 02 Bratislava 3  
Slovenská republika

E: info@mr-diagnostic.cz

T: +421 (0)2 20 633 367

W: www.mr-diagnostic.cz

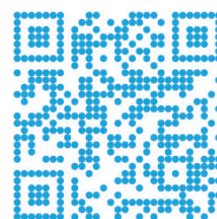

[www.pari-inhalatory.sk](http://www.pari-inhalatory.sk)