



Nebulizačný systém

PARI GmbH

Popis

Nebulizačný systém PARI eFlow rapid je inovatívne zariadenie určené k liečbe respiračných ochorení. V priebehu svojho vývoja bola venovaná zvláštna pozornosť zhodnotenia potrieb pacientov po efektívnej, bezpečnej a predovšetkým rýchlej inhalačnej liečbe. Vďaka časovej úspore viac než 50% a svojej bezhlučnosti – tak nenápadnej prevádzke – môže byť eFlow rapid užitočný pre pacientov s cystickou fibrózou. Pomocou eFlow rapid môžu byť lieky schválené k inhalácii doručené rýchlo a účinne hlboko do pľúc. eFlow rapid je vhodný k nebulizácii všetkých liekov, ktoré boli schválené k použitiu a sú k dispozícii v celej Európe. Ponúka tiež celosvetovú prenosnosť a bezkonkurenčnú hygienickú spoľahlivosť.

Obsah balenia

Balenie obsahuje dva kompletné nebulizéry 2.0 (vrátane vyvíjača aerosólu 2.0), jednoduchú čistiacu pomôcku, riadiacu jednotku s batériami, pripojovaciu hadičku, medzinárodný sieťový napájač so štyrmi výmennými adaptérmi, prepravnú tašku a vrecko na nebulizér.



Vyvíjač aerosólu eFlow rapid

Výhody

- krátka doba inhalácie
- tichý chod pre diskrétnu použitie
- ľahký, kompaktný a prenosný
- prevádzka na batérie alebo z el. siete
- ľahké čistenie
- displej zobrazujúci priebeh inhalácie

Riadiacu jednotku eBase možno použiť s nebulizérom eFlow rapid ku klasickej inhalácii alebo so špeciálnymi nebulizérmi k inhalácii pre konkrétne liečivá.

Určenie

Vhodný pre veľmi účinnú a rýchlu inhalačnú terapiu pacientov nielen na cesty. Ideálny pre pacientov s cystickou fibrózou.



Riadiaca jednotka eBase

Technické údaje

Nebulizér

princíp nebulizácie	perforovaná oscilačná membrána
oscilačná frekvencia	117 kHz
hmotnosť	~55 g
min. objem náplne	2 ml
max. objem náplne	6 ml
rozmery (v x š x d)	6,3 cm x 5,0 cm x 14,5 cm

eFlow

rozmery	ø 11 cm
hmotnosť vr. batérií	~300 g
elektrické pripojenie	100–240 V~, 50/60 Hz, 2 W

Charakteristika aerosólu

celkový výstupný výkon	610 mg/min
mediánny priemer častíc (MDD)	4.1 µm
podiel častíc s priemerom pod 5 µm	69 %

Merané s prístrojom Malvern Mastersizer X (spočítané podľa Fraunhoferovho modelu) vo 23 °C, pri 50% relatívnej vlhkosti, rozprašované médium:
0,9% NaCl (5 ml) inspiračný prietok 20 l/min.

CE 0123



náustok



easycare - čistiaca pomôcka

Typy produktov

PARI eFlow

178G1005

Voliteľné príslušenstvo

(nie je súčasťou balenia)

eFlow rapid nebulizér

678G8222

vyvíjač aerosólu eFlow rapid

678B2620

prepravná taška pre eFlow rapid

078E8005

náustok

078B3600

maska pre deti

078G5000

maska pre dospelých

041G0730

viečko nádoby pre liečivo

078B3800

easycare (čistiaca pomôcka)

078G6100

vdychovací ventil

078E3402

pripojovací kábel

178B6003



vdychovací ventil



prepravná taška pre eFlow rapid

MR Diagnostic s. r. o.

Pod Višňovkou 1662/21
140 00 Praha 4
Česká republika

E: info@mr-diagnostic.cz

T: +420 245 005 648


W: www.mr-diagnostic.cz

Račianska 72
831 02 Bratislava 3
Slovenská republika

E: info@mr-diagnostic.cz

T: +421 (0)2 20 633 367

W: www.mr-diagnostic.cz

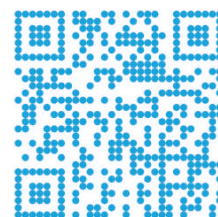

www.pari-inhalatory.sk